
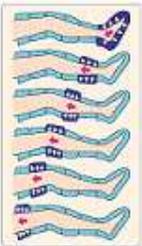


MODELO	Presoterapia Power Q6000-Plus	
<p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentación 220-240 V 50/60 Hz • Consumo 80 VA • Tiempo regulable 0÷99 minutos • Presión regulable 10÷240 mmHg ±10% • 2 canales de salida (posibilidad de conectar hasta tres aplicadores) • 5 programas • 8 niveles de velocidad de flujo de aire • Pantalla grafica • Peso: 9.5 Kg 		
<p>Indicada y sugerida para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Linfedema • Parálisis de los miembros • Compresión pasiva en patologías venosas • Artritis reumatoide • Drenaje del brazo después de intervenciones de mastectomía • Tratamiento de hematomas siguientes a intervenciones de cirugía estética • Tratamiento anticelulítico en estadio inicial • Profilaxis post-operatoria en intervenciones de trombosis venosa 		
<p>Power Q6000 Plus es el nuevo sistema de presoterapia para el uso profesional que favorece una correcta circulación venosa debido a su acción de inflado / desinflado de las cámaras de aire.</p> <p>La presoterapia es capaz de resolver el problema del estancamiento en los vasos sanguíneos, que están dañados o que no irrigan correctamente, también promueve la eliminación del exceso de líquido intersticial mediante la estimulación del drenaje de la linfa. Por tanto, es útil tanto para fines estéticos (tratamientos anticelulíticos) como para tratar los problemas relacionados con la circulación de flujo sanguíneo y linfático (linfedema).</p> <p>Gracias a sus dos salidas, y las tuberías de conexión de 1 o 2 derivaciones suministradas con Power Q6000 Plus le permite conectar simultáneamente hasta 3 aplicadores: esta característica es muy útil si lo que necesita es aplicar el tratamiento de la zona abdominal y ambas piernas en la misma sesión.</p> <p>Power Q6000 Plus dispone de 5 modos diferentes de inflar las cámaras de aire, 8 niveles de velocidad del flujo de aire dentro de las cámaras secuenciales y la capacidad de ajustar la hora y la terapia de presión. De esta manera usted puede personalizar cada tratamiento con base en las necesidades terapéuticas del paciente.</p>		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>[MODE A₁]</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>[MODE A₂]</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>[MODE B]</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>[MODE C]</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>[MODE D]</p> </div> </div>		

Power Q6000 Plus viene con las dos piernas y 6 cámaras de compresión, (2 de presión plantar), 2 parejas de perneras desechables en TNT monopaciente, una banda con seis cámaras de compresión-abdominal, una cámara de compresión de brazo con 6 cámaras y sus tuberías de conexión de 1 y 2 derivaciones.

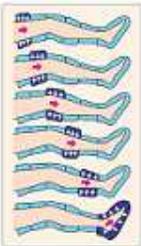

Medidas accesorios

Perneas

- Longitud: 86 cm de extremo superior a talón)
- Circunferencia en el muslo: 71 cm
- Circunferencia en el tobillo: 42 cm

Brazo

- Longitud: 86 cm
- Circunferencia en el bíceps: 50 cm
- Circunferencia en la muñeca: 36 cm

Faja abdominal

- Longitud: 136 cm
- Altura: 46 cm circa
- Cintura: 55-110 cm

Power Q6000 Plus es un dispositivo médico de clase IIa, CE1023 en acuerdo con MDD 93/42/CEE.