

EPILMAX PRO

DEPILACIÓN PERMANENTE | FOTORREJUVENECIMIENTO

“EPILMAX PRO” ES UNA MÁQUINA INNOVADORA CON UNA DOBLE FUNCIÓN.

DEPILACIÓN PERMANENTE: GRACIAS A LA NUEVA TECNOLOGÍA “LED DE ALTA POTENCIA”, EL EXCESO DE VELLO SE ELIMINA PROGRESIVAMENTE EN POCAS SESIONES. EL TRATAMIENTO ES INDOLORO GRACIAS AL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LA PIEL Y AL DELICADO AJUSTE DE LA INTENSIDAD.

LA TECNOLOGÍA LED DE ALTA POTENCIA GARANTIZA RESULTADOS PROFESIONALES EN POCAS SESIONES.

FOTORREJUVENECIMIENTO: EL APARATO OFRECE FUNCIONES ANTIENVEJECIMIENTO ESPECÍFICAS PARA LA PIEL DEL ROSTRO. LA LUZ DE ALTA INTENSIDAD “LED DE ALTA POTENCIA” TIENE EL PODER DE ESTIMULAR LA PRODUCCIÓN DE COLÁGENO Y LA CAPACIDAD REGENERATIVA DE LAS CÉLULAS, REDUCIENDO LAS ARRUGAS Y ALISANDO LA PIEL.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tecnología

Led de alta potencia

Intensidad

5 niveles de ajuste desde un mínimo de 9,5 J/cm² hasta 25 J/cm²

Longitud de onda

780-850nm

Temperatura de refrigeración

0°C-10°C

Modos de funcionamiento

- Emisión por puntos para zonas delicadas y muy pequeñas
- Emisión continua ideal para áreas más grandes

Frecuencia

Máximo 180 disparos por minuto

Alimentación

Red eléctrica 100-240V, 50/60Hz, 2A máx

Dimensiones


194x190x82 mm

Peso

550 gr

DOTACIÓN ESTÁNDAR

- Código **G6576**
- 1 Unidad EPILMAX PRO
- 1 Gel Epilmax Pro
- 1 Gafas de protección
- 1 Alimentador
- 1 Manual operativo

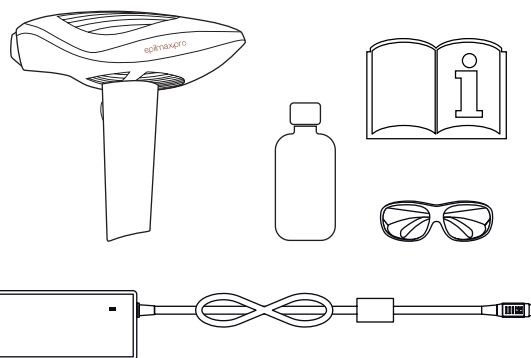

FUNCIONES ESPECIALES

- DISEÑO TECNOLÓGICO PARA UNA DISIPACIÓN EFICAZ DEL CALOR.



- CABEZAL CIRCULAR CON SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PARA UN TRATAMIENTO SIN DOLOR.
- SISTEMA DE SEGURIDAD DE ALTO NIVEL; EL APARATO NO EMITE SI EL CABEZAL NO ESTÁ EN CONTACTO CON LA PIEL.



GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE