

CAMILLA 2 CUERPOS POR CILINDRO DE GAS, ELEVABLE CON RUEDAS, GAMA ECONOMICA "ECOMAX"



Ref. MM-ECOMAX-E
Cod 4035



Ref. MM-ECOMAX-H - Cod 4034

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:




Para exploración, reconocimiento, masaje y/o tratamiento de pacientes. Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI-POLIESTER. Lecho 2 cuerpos con respaldo abatible por cilindro de gas en palanca lado derecho, cuerpo inferior fijo. Elevación en altura dos versiones: hidráulica (H) en pedal bilateral con pedal de descarga, ó eléctrica (E) en pedal de suelo. Sistema "4x4" de rigidez mejorada con 2 compases motrices. Rodamientos Nylon sin "chirridos". Con ruedas escamoteables para mover camilla con paciente accionadas en pedales en ambos ejes de la mesa. Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliester, 650 gr/m2.) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad. Portarrollos de papel de serie. Orificio facial y tapa. Pata con nivelador. Paso de Grúas 14 cm.

COMBINACIONES: 4 MODELOS

Cod. / Ref.	ANCHO 62 CM.	ANCHO 70 CM.	HIDRAULICA	ELECTRICA
4034-62 / ECOMAX-H62	*		*	
4034-70 / ECOMAX-H70		*	*	
4035-62 / ECOMAX-E62	*			*
4035-70 / ECOMAX-E70		*		*



VER MAS VARIANTES Y ACCESORIOS PAG. 28, EN TARIFA ó CONSULTAR

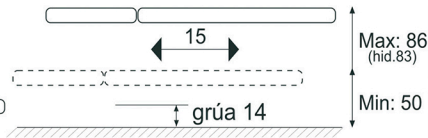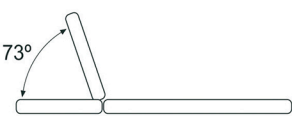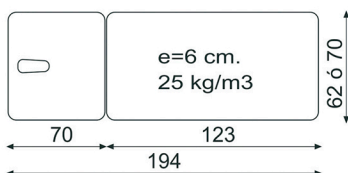

Medidas Totales: Ancho 62 ó 70 x Largo 194 x Alto 50 cm.

