

## CAMILLA ELECTRICA ECONOMICA "KINEFIS DELUXE"





**COMBINACIONES: 8 MODELOS ADULTOS + 4 MODELOS INFANTILES, LOS DE ANCHO 62 CM, AÑADIENDO REF. ECO-INF, COD. 4028.**

Cod. / Ref.	ANCHO 62 CM.	ANCHO 70 CM.	Elevación Hidráulica	Elevación Eléctrica	Sin Ruedas	Con Ruedas
4020-62 / ECO-E62	*			*	*	
4020-70 / ECO-E70		*		*	*	
4021-62 / ECO-ER62	*			*		*
4021-70 / ECO-ER70		*		*		*
4025-62 / ECO-H62	*		*		*	
4025-70 / ECO-H70		*	*		*	
4026-62 / ECO-HR62	*		*			*
4026-70 / ECO-HR70		*	*			*

**CARACTERISTICAS TECNICAS:** Para exploración, reconocimiento, masaje y/o tratamiento de pacientes. Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI-POLIESTER. Lecho 2 cuerpos con respaldo abatible por enclave con manetas de accionamiento bilaterales. Elevación en altura eléctrica (E) en pedal de suelo. Opcion ruedas escamoteables para **mover camilla con paciente** accionadas en pedales en ambos ejes de la mesa (R). Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliester, 650 gr/m<sup>2</sup>) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad. Rodamientos Nylon sin "chirridos". Portarrollos de papel de serie. Orificio facial y tapa. Pata con nivelador. Paso de Grúas 16 cm.

**VER MAS VARIANTES Y ACCESORIOS PAG. 28, EN TARIFA ó CONSULTAR**

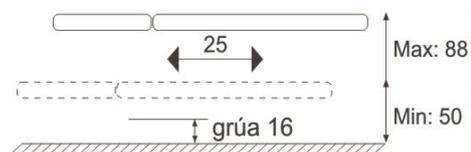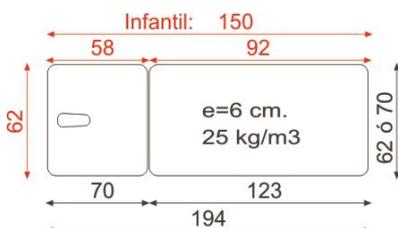

Medidas Totales: Ancho 62 ó 70 x Largo 194 x Alto 50 cm.  
Med. Tot. Infantil: Ancho 62 x Largo 150 x Alto 50 cm.



## 21-E

### DESCRIPCION AMPLIA:

**Camillas KINEFIS DELUXE: la Mejor Calidad / Precio del Mercado de Fabricación Española.**

Las **Camillas KINEFIS DELUXE** son una de las **opciones más económicas y seguras para el profesional que empieza en el mundo de la fisioterapia, salud y estética.**

La **camilla** es **ideal** para **centros de fisioterapia, rehabilitación, estética, exploración** y todas aquellos que requieran trabajos con un cliente tumbado cómodamente en posición horizontal o recostado en un plano semi-inclinado.

### Puntos Fuertes:

- La **estructura es de gran robustez** y los **materiales son de primeras calidades**, lo que **alarga la vida útil de la camilla. Calidad y garantía** de la marca **KINEFIS**.
- **Diseñada** con las **patas más estrechas que el tablero**, este diseño **permite al profesional acercarse al paciente con facilidad** sin nada con lo que tropezarse lo que facilita su trabajo.
- **Tapizado de gran resistencia** a la abrasión, transpiración, aceites y otras manchas.
- **Cabezal con orificio facial y tapón tapizado**, lo que permite al paciente colocarse en posición "boca-abajo" de una manera cómoda.
- Lecho de la camilla, de **2 cuerpos**, puede elevarse desde 50 cm hasta 88 cm, con **respaldo abatible por enclave con manetas de accionamiento a ambos lados de la camilla** lo que **permite al profesional una fácil adaptación a la terapia a realizar.**
- **Portarrollos incorporado de serie en la estructura** para una útil colocación del papel camilla

### Descripción Técnica:

- Camilla para exploración, reconocimiento, masaje y/o tratamiento de **pacientes**.
- Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI-POLIESTER, color **blanco grisáceo RAL 9002**.
- Lecho **2 cuerpos** con respaldo abatible por enclave con manetas de accionamiento bilaterales. Respaldo con bastidor completo perimetral estructural independiente, y varilla maciza de acero para rotación sin bisagras, para proteger el tapizado, evitando el arrancamiento y abocardado de orificios/tornillos, ó rotura del inserto de madera, ya que ésta no cumple función estructural.
- Respaldo reclinable por pistón-embolo de acero de enclave a infinitas posiciones, mecanismo de longevidad perpetua sin mantenimiento, averías o roturas, (SIN sistemas de cremallera, que ofrecen posiciones fijas de regulación (dientes),que para regular hacia abajo es necesario empujar adelante provocando incomodidad al paciente, y siempre acaban rompiéndose por desgaste).
- Respaldo con **orificio facial y tapón facial**.
- Elevación en altura eléctrico** con pedal de suelo de serie. Motor lineal de 600 kg. de fuerza (6.000 Nw., TiMotion). Altura mínima. 50 cm y altura máxima 88 cm.
- Giros-articulados antichirrido, sin mantenimiento, con rodamientos de fricción de **poliamida PA 6.6**, con

ajustes radial y axial, protección antichirridos garantizado.

-Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliester, 650 gr/m2., gama Valencia, Spradling, Alemania) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad.

-Pata con **nivelador**. Paso de **Grúas** 16 cm. **Portarrollos** de papel de serie.

-Modelo disponible: sin ruedas escamoteables / con ruedas escamoteables

-Opción con ruedas escamoteables accionadas en pedales en ambos ejes de la mesa: Sistema de rodadura mediante piezas de acero al carbono macizo mecanizado/ajustado en torno-fresadora para óptimo ajuste y resistencia, mecanismo de longevidad perpetua sin mantenimiento, averías o roturas, **para elevar y reubicar camilla incluso con paciente**. Ruedas con rodamientos, banda termoplásticas de bajo ruido, no marcan (Tente, Alemania).

-Camilla más económica del mercado de fabricación íntegra en España, y con Marcado CE, lo que da una garantía de encontrar recambios en un futuro, de una forma rápida y a precios razonables, al contrario que en las importadas.

-Las **camillas eléctricas KINEFIS** son **fabricadas en España**, destacan por su **gran calidad y precio**.

-GARANTIA: 2 años (1 año en los actuadores: motores eléctricos, bombas hidráulicas y pistones de gas). Estructura 5 años.